

¡La plata vale su peso en oro!



roeko Gelatamp

Gelatamp es una esponja de gelatina espumosa, uniforme y de poros finos con plata coloidal destinada a la curación de las heridas, tras extracciones y otras intervenciones, posee un efecto hemostático y antibacteriano a la vez, gracias a los iones de plata.

- Hemostasis inicial rápida.
- Estabilización del coágulo.
- Absorción uniforme y completa.
- Amplio espectro antibacteriano por su contenido de plata coloidal.

GELATAMP permanece en la herida y se absorbe por completo en 4 semanas.

Composición:
Cada esponja contiene Gelatina endurecida 9.5mg y Plata coloidal 0.5mg

COLTENE

COA
INTERNACIONAL


Modo de acción

Colocación de Gelatamp en la herida.

La esponja absorbe una cantidad de sangre comprendida entre 55 y 75 veces su propio peso sin ensancharse.



Agregación plaquetaria; la estructura de la esponja favorece que se depositen las plaquetas y estimule la coagulación sanguínea.

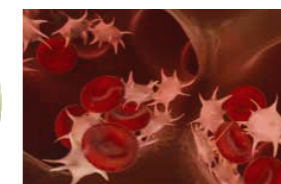

Estabilización del coágulo; se evita la retracción del coágulo sin cavidades ni fisuras.



Amplio efecto de depósito anti-microbiano durante todo el proceso de absorción se liberan iones de plata que actúan contra un amplio espectro de bacterias.



Absorción completa en un plazo de 4 semanas adaptado perfectamente al proceso de cicatrización. No es necesario abrir la herida de nuevo.



COA
INTERNACIONAL

Línea de Atención
a Odontólogos
01 800 7 65 5000

